

Biodent EC40


NL Gebruiksaanwijzing
DU Gebrauchsanweisung
EN Instructions for use
DK Brugsanvisning
NO Bruksanvisning
FI Käyttöohjeet
SV Användnings instruktioner



1



2

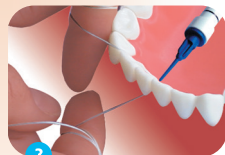

3



4

BIODENT BV • Mollevite 19 • 6931 KE Westervoort
Nederland • T 0031 6 20143120
www.biodent.nl • info@biodent.nl

Biodent EC40 Tandvernis

NL

Ondersteunt een gezonde mondflora

Wanneer gebruiken?

Biodent EC40 gebruiken bij frequent eten van zoetigheid en wanneer tandenpoetsen niet optimaal is.

Hoe vaak gebruiken?

Gebruik Biodent EC40 chloorhexidine vernis om de 3 maanden

Samenstelling

Chloorhexidine, sandarac en ethanol

Niet gebruiken

Bij overgevoeligheid voor chloorhexidine of een van de andere ingrediënten,

Gebruiksaanwijzing

Met een stompe naald een dunne laag aanbrengen op het tandoppervlak dat moeilijk schoon te maken is met tandenpoetsen. Vermijd contact van de vernis met de tong, chloorhexidine tandvernis smaak bitter. Gebruik niet meer dan ¼ spuitje per keer.

1. Aanbrengen op de tandhalzen
2. aanbrengen op het kauwoppervlak
3. Aanbrengen tussen de tanden
4. 5 minuten niet eten en drinken en daarna de vernis wegpoetsen

Biodent EC40 Zahnpflegelack

DU

Unterstützt eine gesunde Mundflora

Wann verwenden?

Biodent EC40 wird dort eingesetzt, wo häufig Zucker verwendet wird und das Zähneputzen nicht optimal ist.

Wie oft verwenden?

Verwenden Sie Biodent EC40 alle 3 Monate.

Komposition

Chlorhexidin, Sandarac und Ethanol.

Verwende nicht

Bei Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin oder einen der sonstigen Bestandteile.

Gebrauchsanweisung

Tragen Sie mit einer stumpfen Nadel eine dünne Schicht auf die Zahnoberfläche auf, die beim Zähneputzen schwer zu reinigen ist. Vermeiden Sie den Kontakt von Chlorhexidin-Lack mit der Zunge. Verwenden Sie EC40 nicht mehr als ¼ Spritze oder Kartusche auf einmal.

1. Auf den Zahnhals auftragen
2. Auf die Kaufläche auftragen
3. Tragen Sie zwischen den Zähnen Zahnseite auf
4. 5 Minuten nach der Anwendung nichts essen oder trinken; Bürsten Sie dann den Lack mit einer Zahnbürste ab. Spucken Sie kleine Reste aus.

Biodent EC40 Tooth care varnish

EN

Supports a healthy oral flora

When to use?

Biodent EC40 is used where there is frequent use of sugar and suboptimal brushing.

How often to use?

Use Biodent EC40 every 3 months.

Composition

Chlorhexidine, sandarac and ethanol.

Do not use

In case of hypersensitivity to chlorhexidine or any of the other ingredients.

Instructions for use

With a blunt needle, apply a thin layer to the tooth surface that is difficult to clean with brushing. Avoid contact of chlorhexidine varnish with the tongue. Use EC40 no more than ¼ syringe or cartridge at a time.

1. Apply to the neck of the tooth
2. Apply to the chewing surface
3. Apply between the teeth, floss
4. Do not eat or drink for 5 minutes after application; then, brush the varnish away the varnish with a toothbrush. Spit out small residual bits.

Biodent EC40

Lakpleje til tænder

DK

Understøtter en sund mundflora

Bruges hvornår?

Biodent EC40 bruges, når der er hyppig brug af sukker og suboptimal tandbørstning.

Bruges hvor ofte?

Brug Biodent EC40 hver 3 måned.

Sammensætning

Chlorhexidin, sandarac og ethanol.

Brug ikke

I tilfælde af overfølsomhed for Chlorhexidin eller et af de andre indholdsstoffer.

Brugsanvisning

Med en optræksprøjte påføres tandoverfladen et tyndt lag hvor det er svært at rengøre med børstning.

Undgå kontakt på tungen med produktet. Brug højst EC40 ¼ sprøjte eller ampul ad gangen.

1. Påfør på tandhalsen
2. Påfør på tyggeoverfladen
3. Påfør mellem tænderne, tandtråd
4. Spis eller drik ikke i 5 minutter efter påføring; børst derefter lakken væk med en tandbørste. Spyt tilbageværende rester ud.

Biodent EC40

Lakk til tannpleie

NO

Hjelper til sunn munnflora

Når skal man bruke?

Biodent EC40 brukes når det er hyppig bruk av sukker og suboptimal tannpuss.

Hvor ofte må jeg bruke?

Brug Biodent EC40 hver 3 måned.

Sammensetning

Klorheksidin, sandarak og etanol.

Ikke bruk

Ved overfølsomhet overfor klorheksidin eller et av de andre innholdsstoffene.

Bruksanvisning

Med en opptreksprøyte påføres et tynt lag på tannoverflaten hvor det er vanskelig å rengjøre med børsting. Unngå tungekontakt med produktet. Bruk ikke mer enn EC40 ¼ sprøyte eller sylinderrampulle om gangen.

1. Påfør på tannhalsen
2. Påfør på tyggeflaten
3. Påfør mellom tennene, bruk tanntråd
4. Ikke spis eller drikk i 5 minutter etter påføring; børst deretter bort lakken med en tannbørste. Spyt ut eventuelle rester.

Biodent EC40

Hampaidenhoitolakka

FI

Tukee tervettä suufloraa

Milloin käytetään?

Biodent EC40:tä käytetään, kun sokeria käytetään usein ja hampaiden harjaus ei ole optimaalinen.

Kuinka usein käyttää?

Käytä Biodent EC40:tä 3 kuukauden välein.

Sisältö

Klooriheksidiini, sandarakki ja etanoli.

Älä käytä

Jos olet yliherkkä klooriheksidiinille tai jollekin muulle valmisteeseen aineosalle.

Käyttöohjeet

Levitä tylsällä neulalla ohut kerros sellaisen hampaan pinnalle, jota on vaikea puhdistaa harjaamalla. Vältä klooriheksidiinilakan kosketusta kielen kanssa. Käytä EC40:tä enintään ¼ ruiskua tai annosta kerrallaan.

1. Levitä hampaan kaulaan
2. Levitä purupinnalle
3. Levitä hampaiden väliin, lankaa väli
4. Älä syö tai juo 5 minuuttia levityksen jälkeen; harjaa sitten loppu pois hammasharjalla. Sylje pienet jäännökset ulos.

Biodent EC40

Tandvårdslack

SV

Stödjer en hälsosam munflora

När ska man använda?

Biodent EC40 används där det förekommer frekvent användning av socker och suboptimal tandbørstning.

Hur ofta ska man använda?

Använd Biodent EC40 var tredje månad

Innehållet

Klorhexidin, sandarac och etanol.

Använd inte

Vid överkänslighet mot klorhexidin eller något av övriga innehållsämnen.

Användningsinstruktioner

Med en trubbig nål, applicera ett tunt lager på tandytan som är svår att rengöra med borstning. Undvik kontakt av klorhexidinlack med tungan. Använd inte EC40 mer än ¼ spruta eller cylinderampull åt gången.

1. Applicera på tandhalsen
2. Applicera på tuggytan
3. Applicera mellan tänderna, rengör med tandtråd
4. Ät eller drick inte på 5 minuter efter applicering; Børsta sedan bort lacket med en tandbørste. Spotta ut små restbiter.